




La semplicità che ti garantisce
libertà di scelta e controllo

Soluzione Implantare Neoss ProActive®

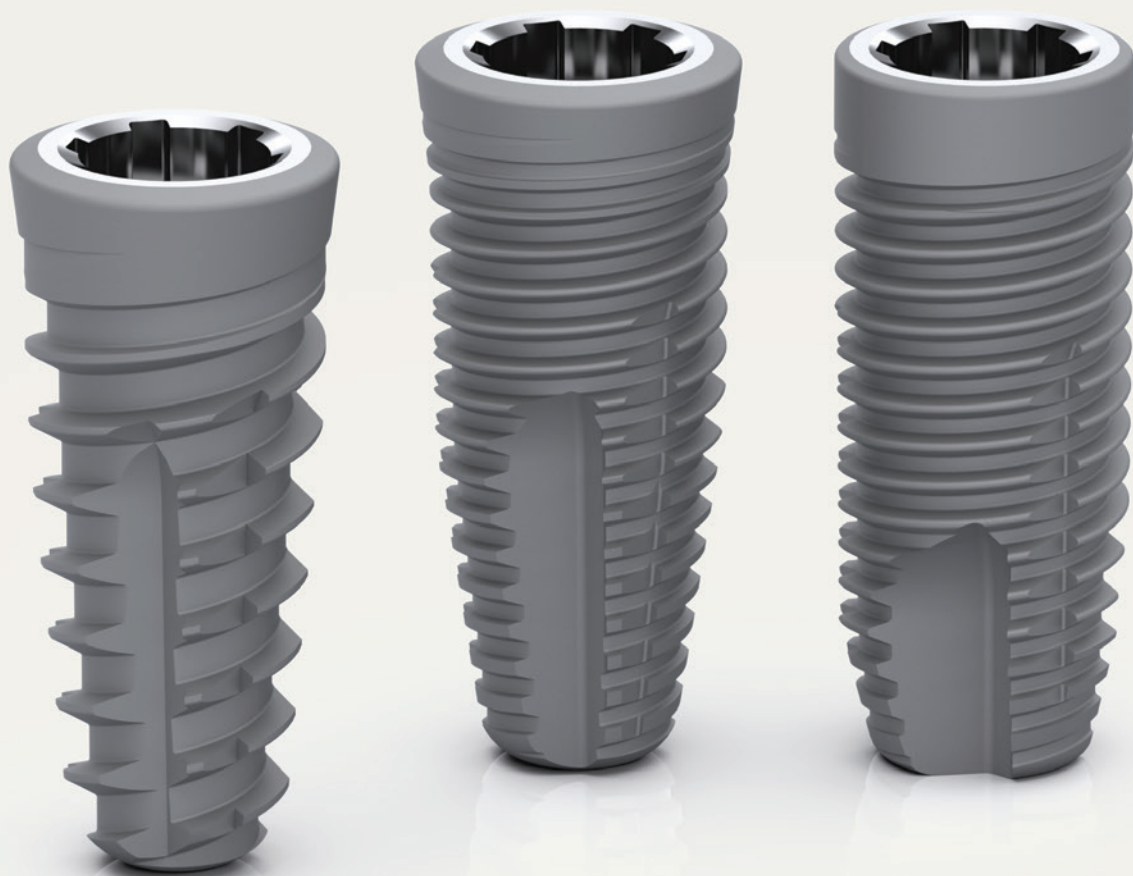

Intelligent Simplicity

Perché Neoss

Il partner *per la tua crescita*

Scegliere Neoss significa poter fare di più, con meno complessità.

Un ecosistema implantare progettato per rendere il lavoro quotidiano più semplice, efficiente e predicibile, lasciandoti più tempo ed energie per ciò che conta davvero: i tuoi pazienti, il tuo team e la tua crescita professionale.

Neoss nasce a Göteborg nel 2000, nella culla della moderna implantologia.

Da allora portiamo avanti una visione chiara: eliminare la complessità che non crea valore, senza rinunciare a ciò che conta davvero.

Intelligent Simplicity

Un inseritore. Un cacciavite. Un transfer con analogo.

Con pochi strumenti gestisci oltre 70 impianti ProActive® SP, attraverso tre design Neoss ProActive® SP *Straight, Tapered, Edge* che condividono:



Un'unica piattaforma
NeossONE®



Un'unica superficie
ProActive®



Un'unica connessione
NeoLoc®

Il sistema implantare Neoss ProActive® si integra nel flusso *Easy Digital*, accompagnando il clinico *dalla diagnosi alla pianificazione, fino alla chirurgia e alla riabilitazione protesica.*

98% tasso di successo a 10 anni

Revisione sistematica di 23 studi indipendenti con follow up a 10 anni^[5]

98%

CSR
a 10 anni^[5]

3.372

pazienti trattati

6.253

impianti Neoss
ProActive®

0,74 mm

rimodellazione
ossea marginale
media

72,1

media ISQ
all'inserimento

Benefici clinici & gestionali

- ✓ *Più efficienza:* stock, procedure e comunicazione più semplici da gestire
- ✓ *Più libertà clinica:* design differenti per adattarsi alle diverse situazioni
- ✓ *Più continuità:* dalla pianificazione digitale alla chirurgia fino alla riabilitazione
- ✓ *Più sicurezza:* un sistema supportato da evidenze cliniche

Superficie Neoss ProActive®

La scienza *incontra la biologia*

Introdotta nel 2009, la superficie Neoss ProActive® è progettata per favorire un'osteointegrazione rapida e predicibile. La sua elevata bagnabilità ed il trattamento della superficie favoriscono il processo di guarigione e contribuiscono a mantenere la stabilità dell'impianto, supportando anche protocolli di carico precoce. [1,2,4,5]

✓ Osteointegrazione rapida e stabile, per una guarigione affidabile [2-4]

Superficie sabbiata, mordenzata, decontaminata e idrofila. L'idrofilia è ottenuta tramite trattamento con ioni Mg^{2+} . [1]



✓ Stabilità implantare mantenuta nel tempo

Ruvidezza ridotta sul colletto ($Sa\ 0.4\ \mu m$) pensata per un miglior mantenimento dell'osso marginale; ruvidezza moderata sulla restante parte del corpo implantare ($Sa\ 1.0\ \mu m$), per favorire l'osteointegrazione. [1]

✓ Preservazione dell'osso marginale

0,66 mm a 1 anno e 0,74 mm a 5 anni: un dato clinicamente rilevante nel mantenimento dell'osso marginale nel tempo. [5,8]


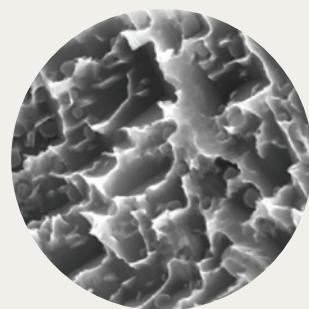


Immagine SEM della superficie ProActive.

✓ Affidabilità clinica comprovata a lungo termine

Dati a 10 anni e tasso di sopravvivenza del 98%. [5-7]

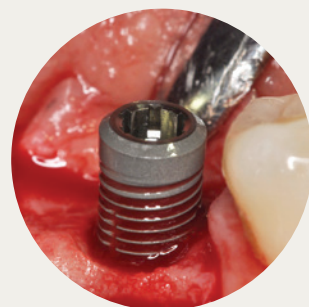

Idrofilia ProActive chiaramente visibile durante l'inserimento chirurgico

Benefici clinici

- ✓ Elevata stabilità primaria e secondaria [2-5]
- ✓ Rimodellamento osseo marginale contenuto
- ✓ Evidenza clinica in protocolli immediati, precoci e differiti
- ✓ Risultati documentati in indicazioni standard, full-arch, rialzo di seno e siti post-estrattivi selezionati [5,13-18,25-27]

Piattaforma NeossONE®

Risparmia tempo e denaro con un'unica piattaforma

La vera innovazione risiede nella razionalizzazione. Gli impianti ProActive® SP – *Straight, Tapered ed Edge* – condividono un'unica piattaforma protesica per ridurre complessità, inventario e costi.

Con un'unica piattaforma protesica per oltre 70 misure implantari potrai usare il 60% di componenti in meno. Tutto ciò si traduce in una soluzione veramente conveniente e in un risultato estetico predicibile.


- ✓ **Un unico transfer, un unico scanbody:**
per rilevare l'impronta in modo semplice su tutti gli impianti SP.
- ✓ **Un'unica piattaforma:**
gli stessi componenti protesici si adattano a ogni impianto SP.
- ✓ **Un unico kit strumenti:**
strumenti comuni e protocolli chiaramente identificati per rendere più lineare la chirurgia e l'organizzazione dello studio.



Kit impianto. Tutto ciò che ti serve.

- ✓ Gli Impianti Neoss ProActive® vengono forniti in confezione Kit Impianto e l'impianto è all'interno di una fiala di vetro.
- ✓ Ogni kit impianto ProActive® SP contiene: impianto, vite di copertura e due pilastri di guarigione di diverse altezze.

Nota bene: Gli Impianti Neoss ProActive® Edge vengono forniti nella confezione Kit Impianto e nella confezione Impianto (contiene l'Impianto e la vite di copertura)

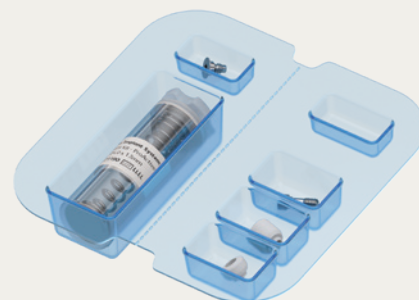

Benefici clinici

- ✓ *Riduzione dell'inventario e delle referenze da gestire*
- ✓ *Ottimizzazione dei costi di gestione e dello stock*
- ✓ *Flussi protesici più semplici, lineari e intuitivi*
- ✓ *Meno passaggi clinici e maggiore efficienza operativa*

Connessione NeoLoc®

La *solidità* che ti dà *sicurezza*

Con oltre **20 anni** di comprovati successi clinici, la connessione meccanica impianto-pilastro **NeoLoc®** rappresenta il cuore della longevità e dell'affidabilità del sistema implantare Neoss. Progettata per offrire un accoppiamento preciso, controllo rotazionale ed elevata forza di serraggio.


La stessa connessione accompagna tutti i design implantari Neoss ProActive® permettendo di cambiare geometria implantare senza modificare il workflow protesico.

✓ **Alette di deformazione nei pilastri antirotazionali:**
contribuiscono a minimizzare i movimenti rotazionali e assicurano un inserimento preciso e chiaramente percepibile.

✓ **Vite per pilastro Neo™ ad alte prestazioni:**
progettata per generare un'elevata forza di serraggio tra pilastro e impianto. ^[29]

✓ **Indicizzazione protesica:**
offre sei possibili posizioni del pilastro facilitando l'allineamento protesico.

✓ **Impianti in Titanio Grado IV:**
resistenza meccanica eccezionale.

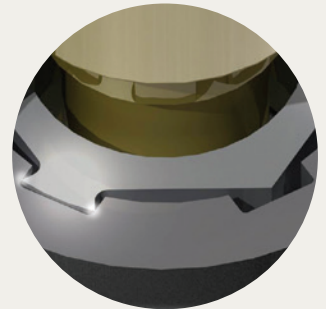

Platform switching integrato

✓ Più spazio per i tessuti transmucosi e preservazione dell'osso marginale.

✓ Con ProActive® Tapered ed Edge il platform switching parte da Ø4,0 mm; con Straight da Ø4,5 mm.



Benefici clinici

✓ *Incidenza di frattura estremamente bassa, meno di 1 impianto su 10.000, secondo i dati storici di garanzia ^[28]*

✓ *Meno svitamenti delle viti nel tempo ^[29]*

✓ *Progettata per sostenere i carichi funzionali di restauri singoli e multipli*

✓ *Maggiore predicibilità e serenità per clinico e paziente*

Tre design implantari

1

NeoLoc®

Connessione solida e salda


- ✓ Unica Connessione impianto-pilastro per tutti gli Impianti ProActive SP e NP.
- ✓ Accoppiamento a interferenza (interference fit) per una tenuta estremamente forte e stabile e un'ottima conservazione dell'osso marginale.

2


NeossONE®

Risparmio di tempo e denaro

- ✓ Unico diametro della connessione per tutti gli Impianti ProActive SP.
- ✓ Unico cacciavite, unico trasfer/scanbody e stessi componenti protesici per 70+ impianti ProActive SP.

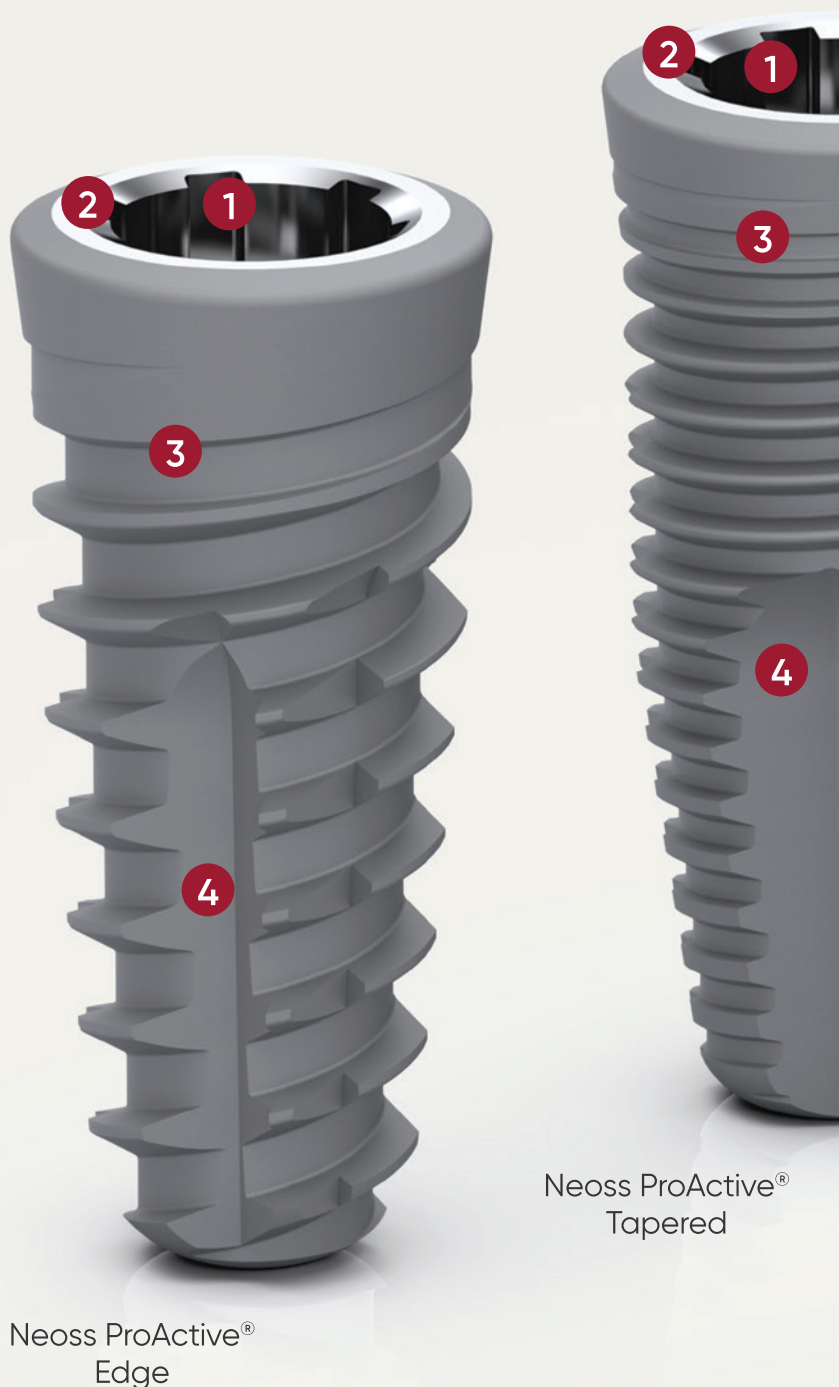

Quattro elementi in comune

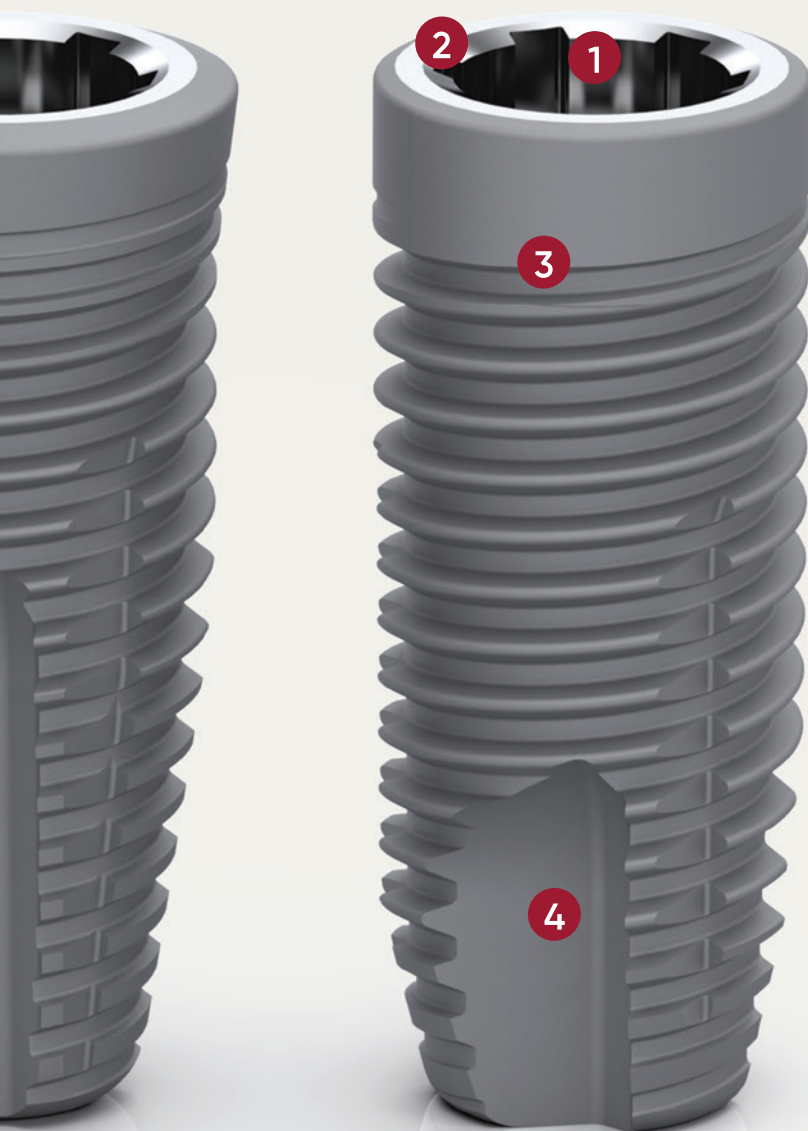

Neoss ProActive®
Straight

3

ProActive®

Superficie bone & tissue friendly

- ✓ Superficie decontaminata ^[1] ad elevata bagnabilità, grazie a un angolo di contatto estremamente basso. ^[1]
- ✓ Duplice ruvidità della superficie per il mantenimento dell'osso marginale e per favorire l'osteointegrazione. ^[1]

4

Design TCF®

Elevata stabilità primaria & inserimento veloce

- ✓ Geometria Thread Cutting & Forming progettata per tagliare e modellare l'osso durante l'inserimento.
- ✓ Favorisce il controllo del torque e la stabilità primaria in differenti qualità ossee ^[12].

Neoss ProActive[®] Edge

Stabilità primaria quando il caso diventa più complesso

Neoss ProActive[®] Edge è il design più recente della gamma ProActive[®], sviluppato per ottenere elevata stabilità primaria attraverso una macrogeometria conica a spira larga. ^[19-22]

Progettato per offrire stabilità primaria eccezionale con un protocollo di fresaggio semplificato (1-2 frese), è ideale per casi clinici sfidanti e situazioni che richiedono predicibilità e risparmio di tempo. ^[19-22]



Indicazioni cliniche

- ✓ Osso a densità ridotta e situazioni in cui è richiesta elevata stabilità primaria ^[19-22]
- ✓ Creste sottili, quando il volume osseo consente un corretto posizionamento tridimensionale ^[20,22]
- ✓ Siti post-estrattivi selezionati ^[20,22]
- ✓ Riabilitazioni singole e multiple ^[20,22]
- ✓ Protocolli immediati o precoci, quando sono soddisfatti i criteri clinici e biomeccanici ^[20,22]

Punti di forza

- ✓ **Design ottimizzato per una minima rimozione ossea:**
la maggior parte dei casi prevede l'utilizzo di 1-2 frese ^[19,21]
- ✓ **Flangia coronale conica:**
con filettature supplementari progettata per offrire maggiore stabilità primaria e tempi di guarigione più rapidi, in particolare nei siti post-estrattivi
- ✓ **Design dell'apice:**
progettato per ottenere stabilità iniziale e massimo contatto osseo

Benefici clinici

- ✓ Filettatura ad *alta presa*
- ✓ Protocollo chirurgico *semplificato* (1-2 frese) ^[19-22]
- ✓ Stabilità primaria *eccellente* ^[19-22]
- ✓ Riduzione della necessità di *procedure rigenerative* ^[19-22]

Neoss ProActive[®] Tapered

Versatilità e *stabilità* nell'osso a bassa densità

Neoss ProActive[®] Tapered è una soluzione versatile, progettata per ottenere un ingaggio progressivo durante l'inserimento e favorire la stabilità primaria nelle differenti qualità ossee. [14-16]

Il protocollo chirurgico può essere adattato alla densità del sito implantare e consente una sottopreparazione dedicata nell'osso D3-D4. La geometria di taglio e formazione del filetto contribuisce a rendere l'inserimento progressivo e controllabile. [14-16]

Indicazioni cliniche


- ✓ Indicato nell'osso a media/bassa densità [14-16]
- ✓ Siti post-estrattivi selezionati [5,14-18]
- ✓ Carico immediato o precoce quando la stabilità primaria è adeguata [5,14-18]
- ✓ Ideale per seni mascellari e situazioni con osso limitato [14,17,18]

Punti di forza

- ✓ **Flangia coronale conica:**
con filettature supplementari progettata per offrire maggiore stabilità primaria, in particolare nei siti post-estrattivi.
- ✓ **Punta apicale "sinus-friendly":**
progettata per proteggere strutture anatomiche delicate.
- ✓ **Facilità di inserimento:**
favorisce il posizionamento in osso morbido, nei siti sottopreparati e in presenza di spazi ridotti.

Benefici clinici

- ✓ *Compressione ossea controllata* [14-16]
- ✓ *Migliore stabilità iniziale* [14-16]
- ✓ *Maggior sicurezza nei protocolli immediati* [14-16]
- ✓ *Maggior controllo nell'osso morbido*

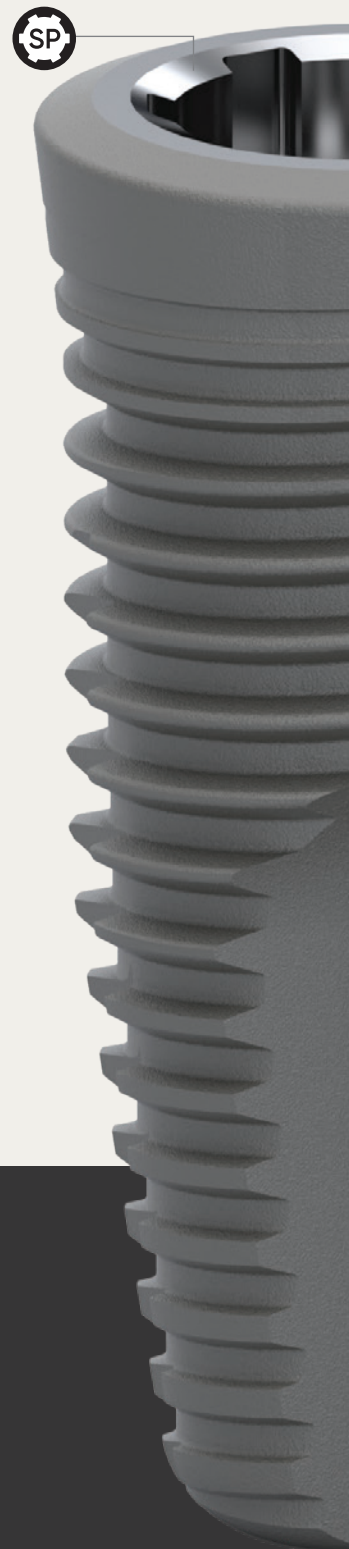

Neoss ProActive® Straight

Controllo e affidabilità nelle indicazioni standard

Neoss ProActive® Straight è il design cilindrico del sistema implantare, indicato quando il clinico ricerca stabilità e risultati a lungo termine.

Ideale per una preparazione progressiva del sito, un maggiore controllo durante l'inserimento e una soluzione documentata per un'ampia gamma di riabilitazioni.



Indicazioni cliniche

- ✓ Inserimento controllato e progressivo
- ✓ Gestione predicibile dell'osso medio o denso
- ✓ Riabilitazioni singole, parziali o complete
- ✓ Protocolli di carico immediato, precoce o differito, quando clinicamente indicati
- ✓ Un design ampiamente documentato nel lungo periodo ^[5-7,9-11,13,25-27]

Punti di forza

- ✓ **Flangia coronale parallela:**
garantisce un posizionamento predicibile e un'elevata stabilità primaria.
- ✓ **Design dell'apice:**
progettato per ottenere stabilità iniziale e massimo contatto osseo.
- ✓ **Impianto corto:**
disponibile anche nella lunghezza di 7 mm, si distingue tra le soluzioni corte per l'elevata robustezza. ^[11]

Benefici clinici

- ✓ *Preparazione del sito calibrata* sulla geometria implantare
- ✓ *Controllo* durante l'inserimento
- ✓ *Ampia flessibilità* chirurgica e protesica
- ✓ *Risultati clinici documentati* fino a 10 anni ^[5-7]

Impianti ProActive® Wide, Sinus & Narrow

Quando l'anatomia cambia, *la libertà di scelta rimane*

ProActive® Wide

Più ancoraggio quando serve

Progettato per aumentare l'ancoraggio nei casi complessi, come siti post-estrattivi, area del seno mascellare e osso compromesso.

- ✓ Ø6.0 mm · lunghezze 7, 9 e 11 mm
- ✓ Maggiore ancoraggio nei casi difficili
- ✓ Stabilità in osso di scarsa qualità
- ✓ Rescue option intraoperatoria



SP · NeossONE, NeoLoc, ProActive, TCF

ProActive® Sinus

Più possibilità in osso limitato

Rappresenta un'alternativa all'aumento osseo, riducendo invasività, tempi e complessità del trattamento, mantenendo la stabilità clinica.

- ✓ Ø6.5 mm · lunghezze 7, 9 e 11 mm
- ✓ Possibile riduzione delle procedure di innesto
- ✓ Elevata stabilità in volumi ossei ridotti
- ✓ Un'unica interfaccia protesica SP



SP · NeossONE, NeoLoc, ProActive, TCF

ProActive® Narrow Ø3.25

Versatilità negli spazi ridotti

Una soluzione a diametro ridotto progettata per creste sottili e spazi interdentali limitati, con un workflow dedicato di strumenti e componenti protesiche.

- ✓ Zone estetiche e creste sottili
- ✓ Diametro Ø3.25 mm (codifica NP & colore blu)
- ✓ Denti singoli e ponti selezionati
- ✓ Stabilità primaria elevata e robustezza [23-24]



NP · NeoLoc, ProActive, TCF

A mano libera o computer guidata

A te *la scelta*

Kit Chirurgico Protesico Neoss

Un unico kit per la gestione degli strumenti chirurgici e protesici, pensato per semplificare workflow e sterilizzazione in studio. Grazie a un design razionalizzato, consente di lavorare con meno strumenti e protocolli di fresatura chiari e strutturati, riducendo la complessità e aumentando la sicurezza dalla prima fresa fino all'inserimento implantare.

- ✓ **Meno strumenti, più semplicità**
- ✓ **Box** compatto e funzionale, con coperchio apribile e rimovibile con una sola mano.
- ✓ **Vassoi** progettati per mantenere gli strumenti nella corretta posizione. Il vassoio chirurgico integra il protocollo di fresaggio, con marcature SP e NP. Il vassoio protesico facilita identificazione, utilizzo e conservazione degli strumenti.



Kit Chirurgia Guidata Neoss

Un kit di chirurgia guidata progettato per semplificare i workflow e aumentare il controllo clinico.

- ✓ **Hard stop integrati e strumenti più corti** migliorano l'accesso anche nei settori posteriori.
- ✓ **Un unico kit per tutti i design implantari Neoss ProActive® SP e NP**, per ridurre il numero di strumenti e semplificare la gestione dello stock.
- ✓ **Due configurazioni disponibili:**

-**Hard Stop:** offset fisso G5 (9 mm) con controllo della profondità integrato su ogni strumento di preparazione osseo


-**Flexible:** offset G3/G5/G7 (7, 9, 11 mm) identificati tramite tre marcature. Maggiore flessibilità per adattare la profondità di fresaggio alle differenti esigenze cliniche.



Easy Digital

Semplicità digitale per te e i tuoi pazienti


L'utilizzo di un flusso di lavoro digitale semplice nella tua pratica quotidiana ti farà risparmiare tempo, aumenterà la predicibilità e ti aiuterà a ottenere i migliori risultati funzionali ed estetici a lungo termine per i tuoi pazienti.

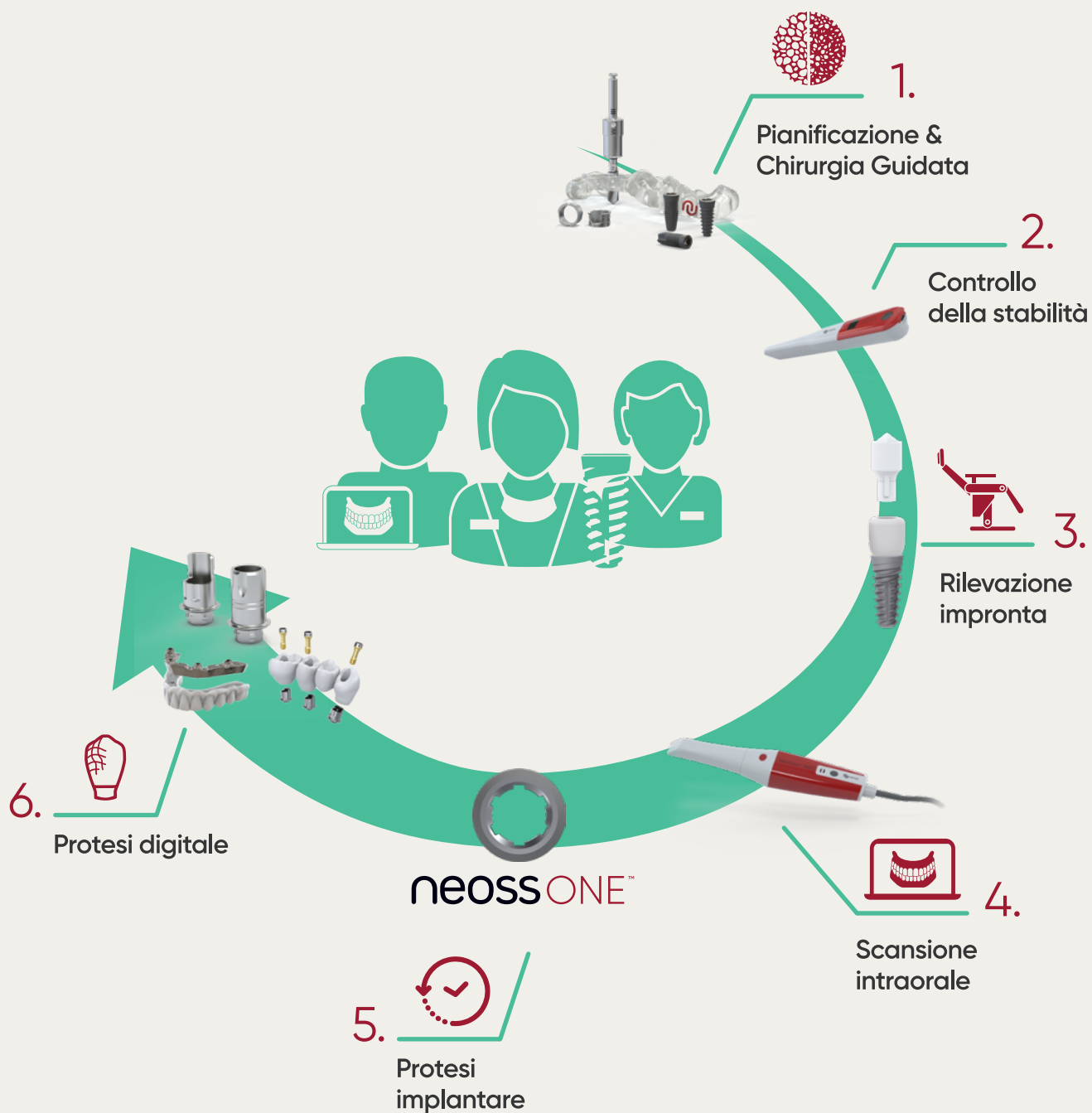


Protocollo chirurgico

Impianti Neoss *ProActive*[®]


Impianti Neoss ProActive[®] Edge

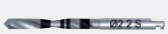	Ø3.5 mm	Ø4.0 mm	Ø4.5 mm	Ø5.0 mm	Stop di profondità
 Ø2.2 S					
 Ø3.0 T					
 Ø3.4 T					
 Ø3.9 T					
 Ø4.4 T					
 Svasatore	Ø3.5 E	Ø4.0 E	Ø4.5 E	Ø5.0 E	
Qualità ossea  Osso morbido  Osso normale  Osso denso					

* è altamente raccomandato l'utilizzo dello Svasatore nelle qualità da osso D1, D2




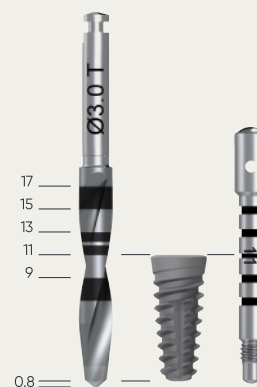


Impianti Neoss ProActive[®] Tapered

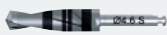	Ø3.5 mm	Ø4.0 mm	Ø4.5 mm	Ø5.0 mm	Ø5.5 mm	Stop di profondità
 Ø2.2 S						
 Ø3.0 T						
 Ø3.2 S						
 Ø3.4 T						
 Ø3.6 S						
 Ø3.9 T						
 Ø4.1 S						
 Ø4.4 T						
 Ø4.6 S						
 Ø4.9 T						
 Ø5.1 S						
 Ø5.5 T						
 Svasatore	Ø3.5 T	Ø4.0 T	Ø4.5 T	Ø5.0 T	Ø5.5 T	
	Uso opzionale	Uso opzionale	Uso opzionale	Uso opzionale	Uso opzionale	
 Maschiatore	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5	
	Uso opzionale	Uso opzionale	Uso opzionale	Uso opzionale	Uso opzionale	
Qualità ossea						
 Osso morbido						
 Osso normale						
 Osso denso						



Impianti Neoss ProActive® Straight SP & NP

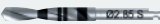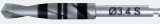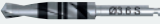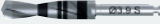	Ø3.25 mm	Ø3.5 mm	Ø4.0 mm	Ø4.5 mm	Ø5.0 mm	Ø5.5 mm	Stop di profondità
 Ø2.2 S							
 Ø2.85 S							
 Ø3.0 S							
 Ø3.2 S							
 Ø3.4 S							
 Ø3.6 S							
 Ø3.9 S							
 Ø4.1 S							
 Ø4.4 S							
 Ø4.6 S							
 Ø4.9 S							
 Ø5.1 S							
 Svasatore	Ø3.25 Uso opzionale	Ø3.5 Uso opzionale	Ø4.0 Uso opzionale	Ø4.5 Uso opzionale	Ø5.0 Uso opzionale	Ø5.5 Uso opzionale	
 Maschiatore	Ø3.25 Uso opzionale	Ø3.5 Uso opzionale	Ø4.0 Uso opzionale	Ø4.5 Uso opzionale	Ø5.0 Uso opzionale	Ø5.5 Uso opzionale	


Qualità ossea




Osso normale



Osso denso

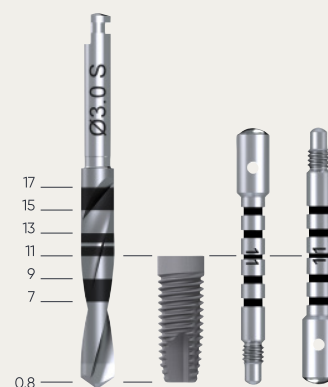

Impianti Neoss ProActive® Wide Ø6.0 & Sinus Ø6.5

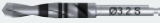	Ø6.0 mm	Ø6.5 mm
 Ø2.2 S		
 Ø3.0 T		
 Ø3.2 S		
 Ø3.4 T		
 Ø3.6 S		
 Ø3.9 T		
 Ø4.1 S		
 Ø4.4 T		
 Ø4.6 S		
 Ø4.9 T		
 Ø5.1 S		
 Ø5.5 T		
 Ø6.0		
 Svasatore	Ø6.0 Uso opzionale	Ø6.5 Uso opzionale

Qualità ossea



Osso morbido
IV & III



Osso normale
II

Neoss® ha ottenuto le certificazioni in conformità alle normative applicabili ai dispositivi medici.

-  Certificato del Sistema di Gestione della Qualità dell'UE, **MDR (MDR 741100)**
-  Certificato del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma **ISO 13485 (MD 75473)**

Scarica qui i certificati: neoss.com/it/certificazioni

Bibliografia:

1. Engman F, Sennerby L. The ProActive implant surface – innovative engineering and surface technology leading to fast implant integration and predictable clinical results. *Letters on Implant Dentistry*. 2022;2:6–11. 2. Sennerby L, Gottlow J, Gottlow J. Integration of Neoss ProActive implants in comparison with other brands of dental implants. *Letters on Implant Dentistry*. 2017;1:7–10. 3. Kunrath M, Aludden H, Norlindh B, Emanuelsson L, Dahlin C. Osseointegration of ProActive implants. A histological comparative study. *Letters on Implant Dentistry*. 2022;2:12–14. 4. Vanden Bogaerde L, Sennerby L. A Randomized Case-Series Study Comparing the Stability of Implant with Two Different Surfaces Placed in Fresh Extraction Sockets and Immediately Loaded. *International Journal of Dentistry*. 2016;2016:8424931. 5. Sahlin H, Bjursten Brailsford M. Implant survival, bone remodeling and implant stability of Neoss ProActive implants: a systematic review of the literature. *Letters on Implant Dentistry*. 2022;2:18–24. 6. Sennerby L, Pagliani L, Volpe S, Andersson P, Verrocchi D. Factors influencing 10-year survival of Neoss ProActive implants. A retrospective survey. *Letters on Implant Dentistry*. 2022;2:29–32. 7. Hassfurth N, Hassfurth N. Long term clinical performance of superhydrophilic dental implants with more than 10 years follow-up. *Clinical Oral Implants Research*. 2021;32(Suppl 22):156–157. 8. Derks J, Schaller D, Håkansson J, Wennström JL, Tomasi C, Berglundh T. Effectiveness of Implant Therapy Analyzed in a Swedish Population: Prevalence of Peri-implantitis. *Journal of Dental Research*. 2016;95:43–49. 9. Coppe M, Degasperis W, Andersson P, Verrocchi D, Sennerby L. 5-year Results of Neoss Dental Implants Restored at Implant-Level. A Retrospective Follow-Up Study. *Journal of Dental and Maxillofacial Research*. 2019;2(2):1–5. 10. Degasperis W, Andersson P, Verrocchi D, Sennerby L. One-year clinical and radiographic results with a novel hydrophilic titanium dental implant. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*. 2014;16(4):511–519. 11. Rosen PS, Sahlin H, Seemann R, Rosen AS. A 1–7 year retrospective follow-up on consecutively placed 7-mm-long dental implants with an electrowetted surface. *International Journal of Implant Dentistry*. 2018;4(1):24. 12. Renouard F, Nisand D. Short implants in the severely resorbed maxilla: a 2-year retrospective clinical study. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*. 2005;7(Suppl 1):S104–S110. 13. Zumstein T, Sahlin H. The evolution of the Neoss implant system: A retrospective follow-up of three patient cohorts treated with three types of Neoss implants. *Letters on Implant Dentistry*. 2017;1:35–38. 14. Zwaan J, Vanden Bogaerde L, Sahlin H, Sennerby L. A One-year Follow-up Study of a Tapered Hydrophilic Implant Design Using Various Placement Protocols in the Maxilla. *The Open Dentistry Journal*. 2016;10:680–691. 15. Andreatta L, Bjursten Brailsford M, Zwaan J. A Simplified Prosthetic Implant Loading Protocol: 1-Year Clinical Follow-Up Study. *International Journal of Dentistry*. 2020;2020:8832500. 16. Schütz S, Zumstein T, Sahlin H, Sennerby L. A five-year retrospective follow-up study of tapered hydrophilic implants placed with or without GBR procedures. *Clinical Oral Implants Research*. 2020;31(Suppl 20):263. 17. Pagliani L, Romano R, Sgarbetta N, Andersson A, Andersson P, Verrocchi D, Sennerby L, Lundgren S. Lateral sinus membrane elevation for graftless bone augmentation at Neoss implants in the atrophied posterior maxilla. A retrospective multi-centre survey. *Letters on Implant Dentistry*. 2022;2:39–44. 18. Volpe S, Di Girolamo M, Andersson P, Verrocchi D, Sennerby L. Short implants for single tooth replacement in limited bone volumes in the posterior maxilla. *Letters on Implant Dentistry*. 2022;2:45–48. 19. Sennerby L, Turra M, Petersson A. The Neoss ProActive Edge implant – biomechanical aspects. *Letters on Implant Dentistry*. 2022;2:15–17. 20. Turra M, Andersson P, Verrocchi D, Sennerby L. The Neoss ProActive Edge implant. Preliminary clinical experiences and results. *Letters on Implant Dentistry*. 2022;2:25–28. 21. Turra M, Petersson A, Sennerby L. Primary stability of three different aggressively threaded and tapered implants in low-density polyurethane. *Clinical Oral Implants Research*. 2020;31(Suppl 20):60. 22. Turra M, Andersson P, Verrocchi D, Sennerby L. A retrospective case series report on a novel aggressively threaded and tapered implant. *Clinical Oral Implants Research*. 2020;31(Suppl 20):257. 23. Andersson P, Pagliani L, Vanden Bogaerde L, Zwaan J, Sennerby L. A retrospective analysis of the use of 3.25 mm Neoss ProActive implants for single tooth replacements and short bridges following both immediate and conventional loading protocols. *Letters on Implant Dentistry*. 2017;1:27–30. 24. Vanden Bogaerde L, Guida A, Moretto D, Sicuro S, Sala D, Sennerby L. Immediate Function of 3.25 mm Diameter Implants in Aesthetic Regions. An 18-month Clinical, Radiographic and Resonance Frequency Analysis Study. *Journal of Dental and Maxillofacial Research*. 2019;2(2). 25. Coli P, Sennerby L. Extraction of Remaining Teeth and Same Day Loading of Neoss ProActive Dental Implants with a Full-Arch Fixed Provisional Bridge. A Survival Analysis. *Journal of Dental and Maxillofacial Research*. 2019;2(2):1–6. 26. Andersson P, Degasperis W, Verrocchi D, Sennerby L. A Retrospective Study on Immediate Placement of Neoss Implants with Early Loading of Full-Arch Bridges. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*. 2015;17:646–657. 27. Zumstein T, Schutz S, Sahlin H, Sennerby L. Factors influencing marginal bone loss at a hydrophilic implant design placed with or without GBR procedures: A 5-year retrospective study. *Clinical Implant Dentistry and Related Research*. 2019;21(5):817–826. 28. Dati su file riferiti alle garanzie Neoss 29. Neoss. Fatigue Performance according to ISO 14801



NP = Impianti Narrow
Platform Ø3.25



SP = Impianti Standard
Platform Ø3.5 – 6.5

Consulta il Catalogo
Prodotto



Ordina i tuoi prodotti
24/7 nell'Online Store



ITALIA

NEOSS ITALIA S.R.L.

Viale Certosa 138, IT-20156 Milano

T: +39 02 92952 1

E: neossitalia@neoss.com

E: NeoScan: neossupport.it@neoss.com

Per i nostri Termini e Condizioni consultare il sito web locale su www.neoss.com
Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti nel proprio mercato, contattare il rappresentante locale. Non tutti i prodotti sono disponibili in ogni mercato.
Le immagini dei prodotti non sono in scala. Tutte le dimensioni sono a scopo identificativo.

2026-08. Stampato in Italia. Si applicano i Termini e le Condizioni di Neoss Italia. © Neoss Limited, 2026. Copyright, design, diritti e marchi in questo documento se non diversamente dichiarato, appartengono a Neoss e non possono essere stampati, copiati o pubblicati in parte o completamente senza autorizzazione scritta di Neoss Limited.